

ARMBIKE KIT

Rullstolen alltid med när du är ute och cyklar. Armbike kittet kan användas som en vanlig brukscykel, för man behöva inte cykla hem efter rullstolen.
Cykel kopplas till sin egen rullstol och drivs framåt när man drar styret mot sig och frihjularna när man skjuter styret från sig "roddrörelse".
20" drivhjul, 7växlad, handbroms, ringklocka och reflex. Vikt ca: 10kg.
Med hjälp av enhands-styret kan man även cykla med en arm.
Max vikt förare 95kg. Färg svart



Armbike kittet passar rullstolar med rund ram (runda rör) där fästena 1 och 2 ska sitta. Se bild till höger

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

- 1. Cykelläge:** rullstolen blir en 3-hjulig cykel.
- 2. Till och ifrån läge:** När man kopplar till cykeln eller kopplar ifrån cykeln.
- 3. Rullstols läge:** Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.

Art.nr

TILLBEHÖR


163	PÅSKJUTARSTÅNG.
109	CYKELKORG 20" – 28" .
107	CYKELKORG 12" .
108	CYKELKORG 16" .
119	DYNINSATS 12" Insats till 12" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
120	DYNINSATS 16" Insats till 16" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
121	DYNINSATS 20" Insats till 20" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
087	BATTERIBELYSNING + MONTERING.
126	ENHANDSSTYRE Styret för personer som endast kan använda en arm (för 0växlar)
218	ENHANDSSTYRE (med plats för växelväljare)

ENHANDS STYRE Art.nr: 126



Cykla med en arm/hand med enhands-styret
OBS. enbart styre, ej handtag, broms, ringklocka och styrstång

DYNINSATS Art.nr: 119, 120, 121

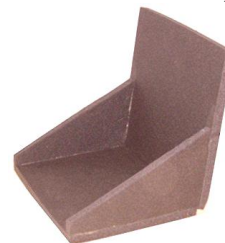

Dyninsats 12" – 20" tjocklek 15mm

ARMBIKE

PETERSBURG NORDANÅ 234		Email : arm.bike@hotmail.com
740 21 JÄRLÅSA	TEL / FAX : (46) 018-25 35 33	Hemsida : www.armbike.se
SWEDEN	TEL : (46) 07 30 96 09 77	Org nr : 560428-1435