

RULLSTOLCYKELN/Armbike-kit

Rullstolen alltid med när du är ute och cyklar.

Den drivs framåt när man drar styret mot sig och frihjulär när man skjuter styret från sig "roddrörelse".


20" drivhjul, 7växlad, handbroms, ringklocka och reflex. Vikt ca: 10kg.

Med hjälp av enhands-styret kan man även cyklar med en arm.

Max vikt förare 95kg. Färg svart



Cykeln passar rullstolar med rund ram/rör och plattovala rör där fästena 1 och 2 ska sitta. Se bild till höger

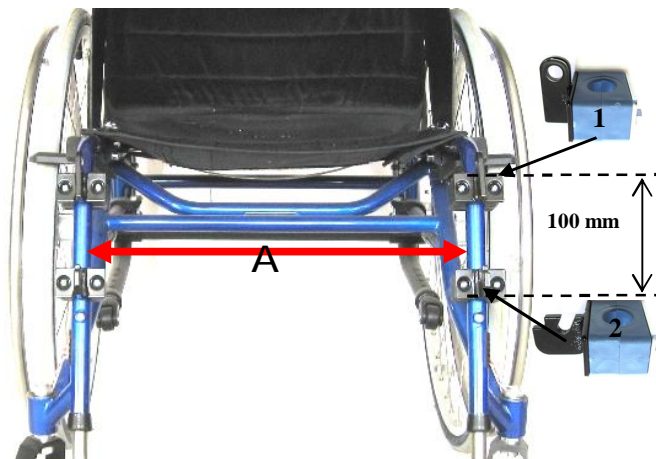

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

1. Cykelläge: rullstolen blir en 3-hjulig cykel.

2. Till och ifrån läge: När man kopplar till eller från cykeln.

3. Rullstols läge: Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.

När du byter rullstol:

Kittet är justerbart på bredden och passar ofta nästa stol om man inte ändrar bredden för mycket.

Byter man till en annan diameter på rullstols ramen, måste man byta ut fästena 1 och 2.

Art.nr

TILLBEHÖR


163	PÅSKJUTARSTÅNG.
109	CYKELKORG 20" – 28" .
107	CYKELKORG 12" .
108	CYKELKORG 16" .
119	DYNINSATS 12" Insats till 12" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
120	DYNINSATS 16" Insats till 16" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
121	DYNINSATS 20" Insats till 20" sits. Sits, sida och rygg. 12mm tjocklek.
087	BATTERIBELYSNING + MONTERING.
126	ENHANDSSTYRE Styret för personer som endast kan använda en arm (för 0växlar)
218	ENHANDSSTYRE (med plats för växelväljare)

ENHANDS STYRE Art.nr: 126



Cykla med en arm/hand med enhands-styret
OBS. enbart styre, ej handtag, broms, ringklocka och styrstång

DYNINSATS Art.nr: 119, 120, 121

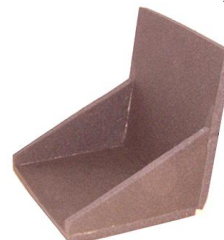

Dyninsats 12" – 20" tjocklek 15mm

ARMBIKE

PETERSBURG NORDANÅ 234		Email : arm.bike@hotmail.com
744 97 JÄRLÅSA	TEL / FAX : (46) 018-25 35 33	Hemsida : www.armbike.se
SWEDEN	TEL : (46) 073 096 0977	Org nr : 560428-1435