

RULLSTOLCYKEL/Armbike kit

Rullstolen alltid med när du är ute och cyklar.

Cykel kopplas till sin egen rullstol och drivs framåt när man drar styret mot sig och frihjular när man skjuter styret från sig "roddrörelse".

20" drivhjul, 7växlad, handbroms, ringklocka och reflex.

Max vikt förare 95kg. Färg svart

Med hjälp av enhands-styret kan man även cyklar med en arm.




Enhands styre

Cykeln passar rullstolar med rund ram/rör och plattovala rör där fästena 1 och 2 ska sitta.

Uppge avståndet mellan rullstolsramen 1A i mm, mät från mitten av röret/ramen + diametern på röret i mm.

Uppge avståndet mellan rullstolsramen 2A i mm, mät från mitten av röret/ramen + diametern på röret i mm.

Vid plattovala rör mät den smalaste sidan. Det ska finnas plats för fästena 1 och 2 som ska vara ca: 100mm

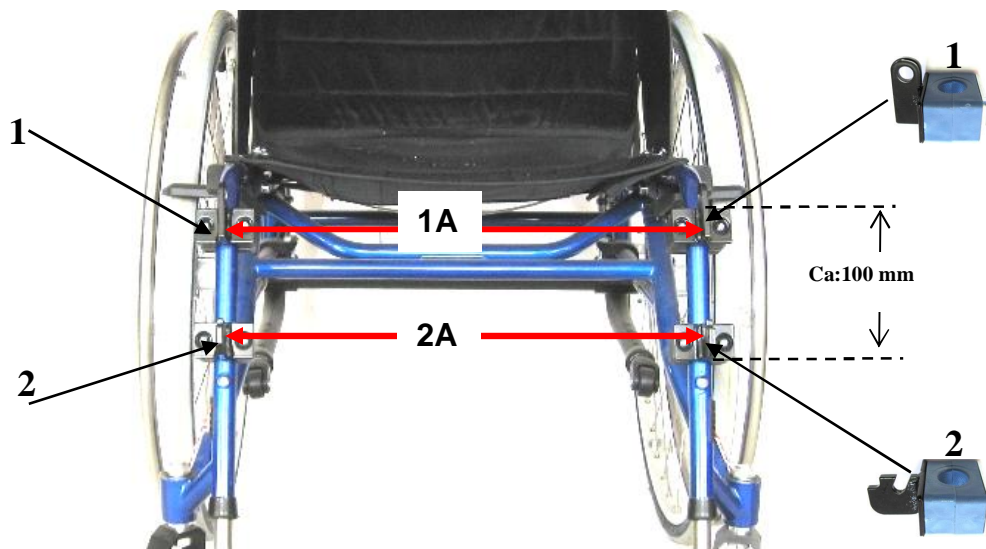

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

1. Cykelläge: rullstolen blir en 3-hjulig cykel.

2. Till och ifrån läge: När man kopplar till/från cykeln.

3. Rullstols läge: Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.

Det finns 3 olika modeller av kittet:

Smal: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 24-33cm.

Mellan: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 31-48cm.

Bred: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 39-64cm.

När du byter din rullstol och inte ändrar bredden för mycket passar kittet även den rullstolen.

OBS: Ändras diametern på rullstolsramen måste fästena 1 och 2 bytas ut.

ARMBIKE

Petersburg Nordanå 234
74497 Järlåsa
SWEDEN

TEL / FAX : (46) 018-25 35 33
TEL : (46) 073 096 0977

Email : arm.bike@hotmail.com
Hemsida : www.armbike.org
Org nr : 560428-1435